



Guide utilisateur LabPortal

SOMMAIRE


1. Connexion Lab Portal	3
1.1 login	3
1.2 Dashboard et Ecrans	4
2. CONSULTATION	7
2.1 Dossier	7
2.2 Echantillon	7
2.3 Analyse.....	8
3. DEMANDE	8
3.1. Création d'une demande.....	9
3.2. Envoi d'une demande.....	10

1. Connexion Lab Portal

1.1 LOGIN

Se connecter au site : <https://app.llucs.lu/>

La connexion sur l'application LabPortal se fait via l'adresse mail de l'interlocuteur Tetraed

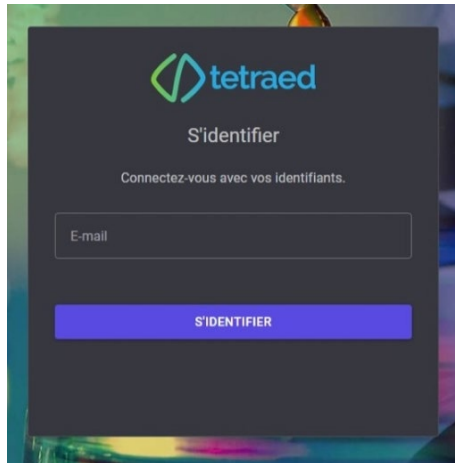

Lors de la première connexion une méthode de double authentification est faite. LabPortal envoie un code unique sur l'adresse mail de connexion afin de vérifier l'utilisateur.

Ce type de message apparaît :

Bonjour Alexis,

Vous-vous apprêtez à créer votre mot de passe pour vous identifier à votre application.


Afin de confirmer votre identité, veuillez saisir ce code :

501114

Merci de votre confiance.

L'équipe Tetraed

Une fois le code renseigné vous devez initialiser votre mot de passe personnel en le renseignant deux fois.

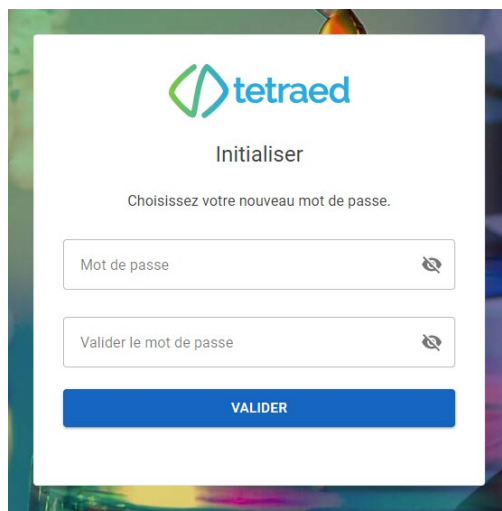


1.2 DASHBOARD ET ECRANS

L'écran principal de LabPortal permet de visualiser rapidement l'encours du laboratoire.

Vous y retrouverez un état du nombre de dossiers, échantillons et analyses sur la période sélectionnée.

Vous pourrez ensuite visualiser les données sur ces dossiers, échantillons et analyses en cliquant directement sur l'icône ou sur l'onglet correspondant de la colonne à gauche de l'écran.

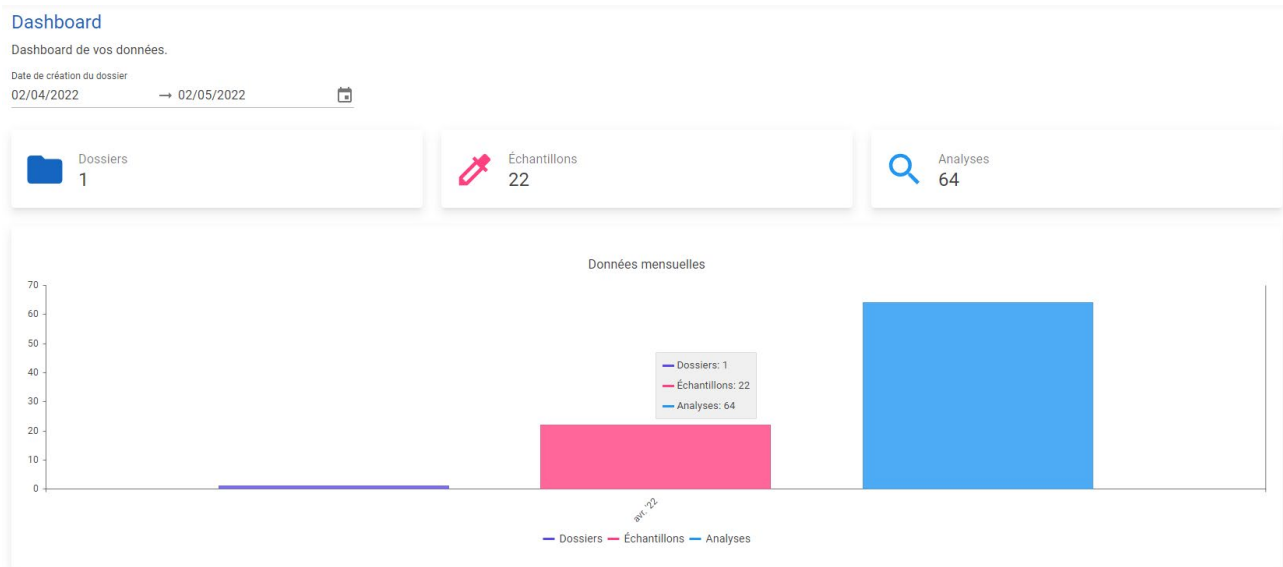

en cliquant sur ce bouton vous faites apparaître ou disparaître la colonne des raccourcis à gauche de l'écran.





en cliquant sur ce bouton en haut à droite de l'écran vous pourrez passer d'un mode « clair » à un mode « sombre ».




ce bouton vous permettra de vous déconnecter de votre session avant de quitter la page.

Vous avez également la possibilité de personnaliser chaque écran :

- Déplacer les colonnes de gauche à droite en sélectionnant la colonne à déplacer avec la souris et la positionner à l'endroit choisi.
- Sélectionner les données à afficher sur une période ou une journée.
- Organiser les colonnes par ordre alphabétique, croissant ... en cliquant juste à côté du nom de la colonne.
- Cliquer sur l'onglet à droite de la colonne permet d'ouvrir le menu ci-dessous et d'utiliser les options suivantes :
 - ✓ « Verrouiller » ou « Déverrouiller » la colonne
 - ✓ Choisir les colonnes à afficher à l'écran
 - ✓ Filtrer les lignes en fonction des informations disponibles

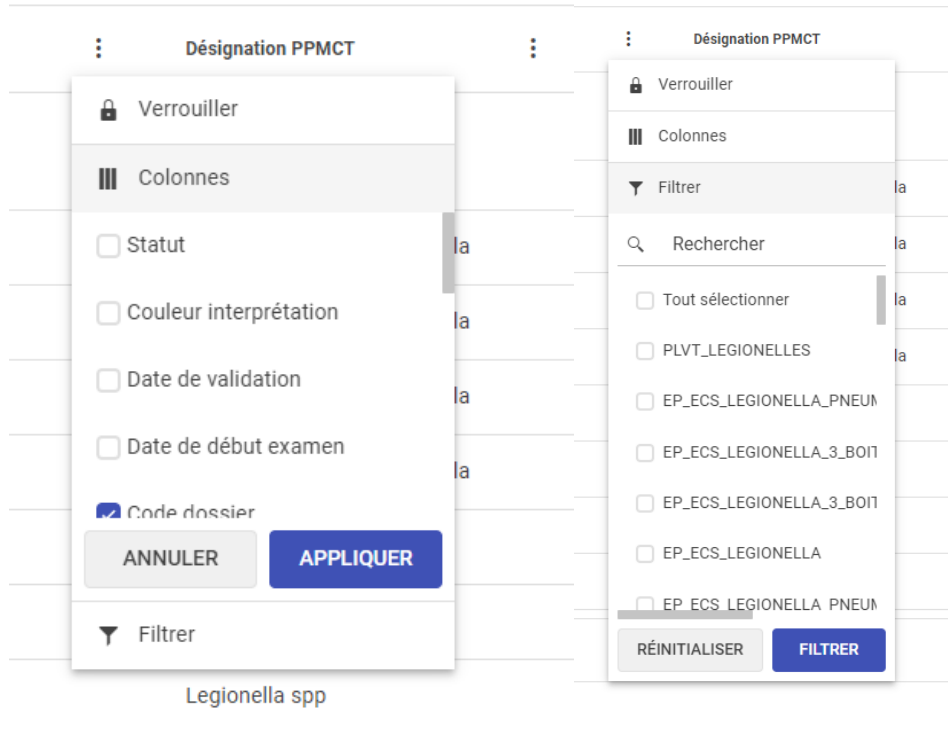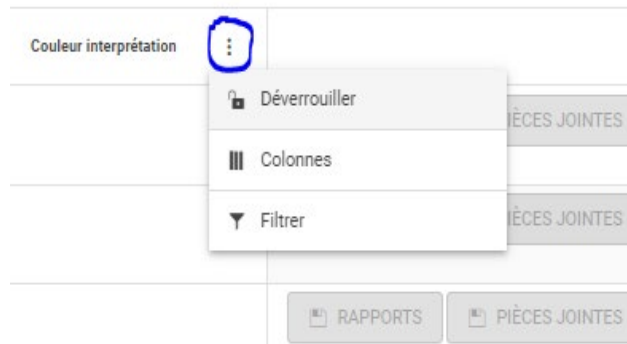

- En cliquant sur le bouton « + » vous pourrez directement visualiser les informations contenues dans un dossier, un échantillon ou une analyse
- Réinitialiser la grille afin de retrouver l'écran avant les modifications apportées.
- Une barre de recherche est également disponible en haut à droite de l'écran.
- Vous avez également la possibilité d'exporter rapidement et facilement en format Excel ce que vous voyez à l'écran.

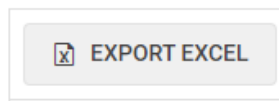

- Les filtres date sont présent sur chaque page de la consultation.

Date de demande

The image shows a date selection interface for the year 2022. At the top, a blue banner displays the year '2022' and the selected date range 'mar., 01 mars - sam., 30 avr.'. Below this, there are two calendar views side-by-side for 'mars 2022' and 'avril 2022'. The 'mars 2022' calendar shows days from 1 to 31, with the 1st highlighted in a blue circle. The 'avril 2022' calendar shows days from 1 to 30, with the 30th highlighted in a blue circle. Navigation arrows are present on the left and right sides of the calendar views.

2. CONSULTATION

2.1 DOSSIER

La consultation par dossier permet de lister les dossiers en cours.

Dossier

Liste de vos dossiers.

Date de création du dossier
01/03/2022 → 30/04/2022

EXPORT EXCEL RÉINITIALISER LA GRILLE

Glisser un en-tête de colonne ici pour regrouper par cette colonne.

Statut		Code	Désignation	Date de début examen	Date de vali...	Date de pré...
+	EnCours		D22-04-001		13/04/2022	
+	EnCours		D22-03-0005		28/03/2022	
+	EnCours		D22-03-0004		07/03/2022	
+	EnCours		D22-03-0003		04/03/2022	
+	EnCours		D22-03-0002		02/03/2022	
+	EnCours		D22-03-0001		01/03/2022	

2.2 ECHANTILLON

La consultation par échantillons permet de lister les échantillons en cours.

Échantillons

Liste de vos échantillons.

Date de création du dossier
01/03/2022 → 30/04/2022

EXPORT EXCEL RÉINITIALISER LA GRILLE

Rechercher...

Glisser un en-tête de colonne ici pour regrouper par cette colonne.

	Code	Désignation	Code dossier	No lot
+		E22-00110 ALIMENTAIRE	D22-04-0001	
+		E22-00109 ALIMENTAIRE	D22-04-0001	
+		E22-00108 Eaux chaudes sanitaires	D22-04-0001	
+		E22-00107 ALIMENTAIRE	D22-04-0001	
+		E22-00106 ALIMENTAIRE	D22-04-0001	
		E22-00105 ALIMENTAIRE	D22-04-0001	
+		E22-00104 ALIMENTAIRE	D22-04-0001	
		E22-00103 ALIMENTAIRE	D22-04-0001	
		E22-00101 ALIMENTAIRE	D22-04-0001	

2.3 ANALYSE

La consultation par analyse permet de lister les analyses en cours.

Analyses

Liste de vos analyses.

Date de création du dossier

01/03/2022

→ 30/04/2022



EXPORT EXCEL RÉINITIALISER LA GRILLE Rechercher...

Glisser un en-tête de colonne ici pour regrouper par cette colonne.

Code dossier	Code PPMCT	Désignation PPMCT	Résultat	Interprétation	Critère Lim Q
D22-04-0001	PLVT_LEGIONELLES	Frais de Prélèvement type Légionelles			
D22-04-0001	EP_ECS_LEGIONELLA_PNEUMOPHILA	Dont Legionella Pneumophila			1000
D22-04-0001	EP_ECS_LEGIONELLA_PNEUMOPHILA	Dont Legionella Pneumophila			1000
D22-04-0001	EP_ECS_LEGIONELLA_PNEUMOPHILA	Dont Legionella Pneumophila			1000
D22-04-0001	EP_ECS_LEGIONELLA_PNEUMOPHILA	Dont Legionella Pneumophila			1000
D22-04-0001	EP_ECS_LEGIONELLA_3_BOITES_LECTURE_3	Legionella			
D22-04-0001	EP_ECS_LEGIONELLA_3_BOITES_LECTURE_1	Legionella - 1ère lecture			1000
D22-04-0001	EP_ECS_LEGIONELLA	Legionella spp	10		
D22-04-0001	EP_ECS_LEGIONELLA	Legionella spp			

3. DEMANDE

LabPortal vous permet de créer vos demandes d'analyse et de renseigner toutes les informations qui permettront au laboratoire de réaliser les analyses.

Ecran en mode « GRILLE » (« NOUVELLE LIGNE »)

The screenshot shows the 'Demandes' (Requests) section of the llucs application. It features a sidebar with navigation options like 'Administration', 'Grille demandes', and 'Ecrans demandes'. The main content area displays a table of requests with columns for Actions, Id, Statut, Date de demande, Tiers, Site, and Produit. The table contains four rows of data, each with a set of action icons (add, edit, delete, etc.) in the first column.

Actions	Id	Statut	Date de demande*	Tiers*	Site*	Produit*
[Icons]	3947	EnCours	26/03/2024 11:36	LLuCS010 LLuCS	LLuCS010 LLuCS	ALIM_GMS_PLATS_PREPARES_CUITS Plats préparés cuits à consommer, surgelés à réchauffer
[Icons]	2844	EnCours	28/12/2023 10:17	LLuCS010 LLuCS	LLuCS010 LLuCS	EAU_LEGIO_EAU_PROPRES Recherche de Legionella dans l'eau
[Icons]	1855	EnCours	06/10/2023 15:52	LLuCS010 LLuCS	LLuCS010 LLuCS	EAU_LEGIO_EAU_PROPRES Recherche de Legionella dans l'eau
[Icons]	1853	EnCours	06/10/2023 12:38	LLuCS010 LLuCS	VEOL010 VEOLIA Luxembourg S.A. / Agences 10 et 13	LABP_VEOL010x_VEOLIA_LEGIO_NFT_EP Analyse Légionelles Eau Propre (ECS)

1 - 4 sur 4 éléments

Ecran en mode « FICHE » (« NOUVELLE FICHE »)

✎ Créer

Tiers*
LLuCS010 | LLuCS ✕ 🔍

Site*
LLuCS010 | LLuCS ✕ 🔍

Produit*
ALIM_GMS_PLATS_PREPARES_CUITS | Plats préparés cuits à consommer, surgelés à réchauffer ✕ 🔍

Date prélèvement
29/05/2024 10:51 🗓

Prélevé par

Dénomination

Composition

Référence client

Etat ▼

N° de lot
DLC
jj/mm/aaaa --:-- 🗓

Date d'analyse
jj/mm/aaaa --:-- 🗓

Date de fabrication - préparation
jj/mm/aaaa --:-- 🗓

Date tranchage

ANNULER ENREGISTRER

- + NOUVELLE LIGNE créer un nouvel échantillon en mode grille (par ligne)
 - 📄 NOUVELLE FICHE créer un nouvel échantillon en mode fiche (écran)
 - + GS1 création d'étiquette échantillon
 - 📄 TOUT EXPORTER permet d'exporter au format Excel toutes les lignes à l'écran
 - RÉINITIALISER LA GRILLE réinitialise l'ordre des colonnes comme à l'origine
 - 📄 TOUT ENVOYER AU LABORATOIRE permet d'envoyer au laboratoire tous les échantillons (lignes) à l'écran
 - 🗑 SUPPRIMER supprime la(les) ligne(s) sélectionnée(s)
- 📄 Enregistrer
 - ✎ Modifier la ligne
 - 🕒 Historique/Traçabilité

- 🔄 Annuler
 - 📄 Modifier en fiche
 - 🗑 Supprimer

- ➡ Envoyer au laboratoire
 - 📄 Dupliquer

3.1. CREATION D'UNE DEMANDE


- Cliquer sur « + NOUVELLE LIGNE » ou « NOUVELLE FICHE » selon le mode choisi.
- Renseigner les champs obligatoires : nom de colonne avec *
- **Il est conseillé d'enregistrer** la demande avant de renseigner les autres champs.
- Compléter l'ensemble des champs. Certains seront peut-être obligatoire pour continuer
- Une fois toutes les informations complétées, enregistrer la demande.
- Vous avez ensuite la possibilité de créer une nouvelle demande ou de dupliquer une demande enregistrée puis de la compléter.

3.2. ENVOI D'UNE DEMANDE


Une fois toutes les demandes complétées et enregistrées vous pourrez les envoyer au laboratoire.

ATTENTION : une fois envoyée, il ne sera plus possible de modifier votre demande. En cas d'erreur il faudra prévenir le laboratoire.

- Envoi de toutes les demandes en cours:

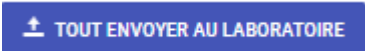Cliquer sur  et toutes les demandes en cours visibles à l'écran seront envoyées automatiquement.

- Envoi multiple :

Sélectionner les demandes à envoyer puis cliquer sur le bouton .

- Envoi individuel

Cliquer sur le bouton  de la demande à envoyer.